




多用途可變速 渦旋震盪器

Major Science 多用途可變速渦旋震盪器是一款高效、緊湊的儀器，適用於生命科學、化學、醫學、生物工程、分析和研究實驗室領域所需的任何混合應用。

本產品採用偏心旋轉的結構，使試管、離心管、微載盤等容器內的液體產生渦流，使溶液能充分混合。

渦旋震盪器有兩種操作功能模式可供選擇：連續模式提供可改變速度，並允許低轉速啟動以進行溫和混合或是高速啟動以混合樣品，在點觸模式下，可在按壓載台時產生混合效果。

Major Science 多用途可變速渦旋震盪器穩定且耐用可靠，並有多種配件可供選擇，並適應各種不同的實驗需求。

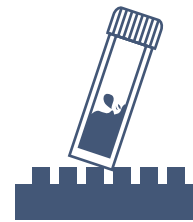

產品規格

名稱	多用途可變速渦旋震盪器
型號	MS-VM Series
電壓	AC 110V 或 220V, 50/60 Hz
功率	60W
震盪方式	圓周
震盪迴轉直徑	4mm
震盪速度	0-2800rpm, 手動旋鈕調速
震盪模式	三段功能切換: 連續震盪、點觸震盪、靜止
尺寸	170×120×170mm(長×寬×高)
重量	4.8公斤
腳墊	4組橡膠腳墊
標配夾具	3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
選配夾具	15ml/50ml離心管夾具、1.5ml/15ml/50ml離心管海綿架、96孔PCR盤海綿托盤、96孔微載盤海綿托盤

訂購資訊

MS-VM-110-US	多用途可變速渦旋震盪器, 110V, 美國規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
MS-VM-110-JP	多用途可變速渦旋震盪器, 110V, 日本規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
MS-VM-220-EU	多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 歐洲規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
MS-VM-220-UK	多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 英國規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
MS-VM-220-IN	多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 印度規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座
MS-VM-220-CN	多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 大陸規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座

選購配件

MS-VM-001	3吋圓型平底橡膠墊
MS-VM-002	橡膠錐形杯座
MS-VM-003	15ml離心管水平夾具
MS-VM-004	50ml離心管水平夾具
MS-VM-005	1.5ml微量離心管海綿架
MS-VM-006	15ml離心管海綿架
MS-VM-007	50ml離心管海綿架
MS-VM-008	96孔PCR盤海綿托盤
MS-VM-009	96孔微載盤海綿托盤



MS-VM-001



MS-VM-002



MS-VM-003



MS-VM-004



MS-VM-005



MS-VM-006




MS-VM-007



MS-VM-008



MS-VM-009

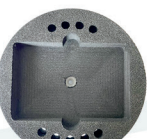

台灣據點

330041(33061) 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

上海據點

Room 612, International business exhibition center,
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China
National toll-free No.:400-823-9177
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007, India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586